

## Larmsystem för medicinska gaser Aspira 9705 / 6701

Larmsystem för medicinska gasanläggningar för upp till 8 gaser via kontaktmanometer alt. 6 gaser via tryckgivare 4-20 mA. Larm vid övre och undre larmgräns för varje gas.

### Larmenhet Master 9705 med batteribackup

Masterenhet 9705 konfigureras via PC-software eller direkt på enheten via knapptryck.

Masterenheten kommunicerar med slavenheten 6701 via Modbus RTU / RS 485

Det finns även 3 reläutgångar för uppkoppling mot t.ex. klinikkens kallelssystem varav en reläutgång är för spänningsbortfall till larmenheten.

Masterenhet 9705 levereras i låda för utanpåliggande alt. infällt montage.



#### Master 9705 Tekniska data

(Displayen ovan visar signal från fyra tryckgivare)

Strömförsörjning: Inkopplas mot 230 VAC 50 Hz 6VA inkl. Batteribackup.

Ingångar: 16 x PÅ/AV (tex. kontaktmanometer)  
6 x 4-20 mA (tex. tryckgivare 4-20 mA)

Utgångar: 3 reläutgångar ställbara NC/NO 1A max varav en för spänningsbortfall till larmenheten.  
MODBUS RTU via RS485

Mått infälld Bredd 290 Höjd 230 Djup 85 mm


Mått Utanpåliggande Bredd 280 Höjd 223 Djup 100 mm

### Slavenhet 6701

Slavenhet 6701 kommunicerar med masterenhet 9705 via Modbus RTU / RS 485

Signal från Master 9705 repeteras i slaven som akustiskt och optiskt summlarm för 1-4 gaser

Slavenhet 6701 levereras i låda för utanpåliggande montage.

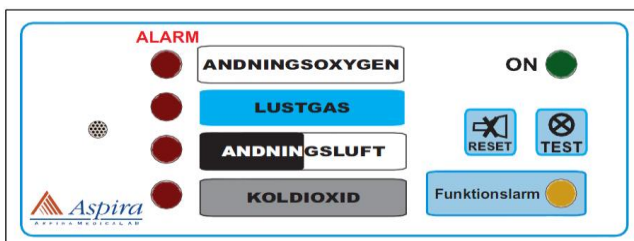

#### Slav 6701 Tekniska data

Strömförsörjning: 230 VAC 50 Hz 6VA

Ingångar: Ansluts till Master 9705 med MODBUS RTU via RS485



#### Slav Enkel

24V från larmenhet Master 9705

Ansluts till Master 9705

#### Artikelnr

410630

410631

410635

410665

410666

#### Benämning

Larmenhet Aspira 9705 för utanpåliggande montage

Larmenhet Aspira 9705 för infällt montage

Slavpanel Aspira 6701 för 1-4-gaser (visar summlarm per gassort) utanpåliggande montage

Slavpanel Aspira Enkel visar endast gaslarm (ej vilken gas som larmar) infällt montage

Ram för slavpanel Aspira Enkel (används för utanpåliggande montage)

Huvudkontor  
Adress

Tel

Fax

E-mail

Bankgiro

Postgiro

VAT

Aspira Medical AB

Duvnäs

781 90 Borlänge

0243 – 23 05 00

0243 – 23 05 07

[info@aspira.se](mailto:info@aspira.se)

5367-4990

637 39 60 – 1

SE556447153901

Försäljningskontor

Aspira Medical AB

Duvnäs

781 90 Borlänge

0243 – 23 05 00

[info@aspira.se](mailto:info@aspira.se)

Hemsida: [www.aspira.se](http://www.aspira.se)

[www.babyskottbord.se](http://www.babyskottbord.se)

Försäljningskontor

Aspira Medical AB

Box 41

239 21 Skanör

040 – 47 57 98

[info@aspira.se](mailto:info@aspira.se)