



EASYFLOW

NCPAP

TILLBEHÖR TILL DET NON-
INVASIVA
VENTILATIONSSYSTEMET
FÖR NEONATOLOGI

LÄTT ATT ANVÄNDA

Det nya EasyFlow-systemet från Fritz Stephan GmbH anpassar sig optimalt till prematurer och nyfödda barns anatomi. Perfekt passande prong och masker är avgörande för skonsam, non-invasiv ventilation. EasyFlow-systemet är lätt att använda och integreras perfekt med SOPHIE- och STEPHANIE-ventilationssystemen för nyfödda.

Det användarvänliga systemtillbehöret består av det nya huvudbandet, en silikongel-panna, applikatorfästet med en metallplatta, en applikator med magnet och en binasal prong eller mask. Längden och höjden är steglöst justerbara. Flexibel anslutningsslang ökar komforten och underlättar inkopplingen. De minskar tryckbelastningen från de tunga ventilatorslangarna avsevärt och gör det enkelt att koppla bort dem från patientens näsa




SKONSAM ANVÄNDNING

Alla systemkomponenter är lätta att använda och anpassar sig optimalt till den individuella anatomin hos spädbarnspatienter. Olika storlekar: Flexibla justerbara huvudband finns i tre storlekar.

EasyFlow nCPAP – Perfekt passform, skonsam och pålitlig.

PERFEKT PASSFORM TACK VARE ANATOMISK DESIGN

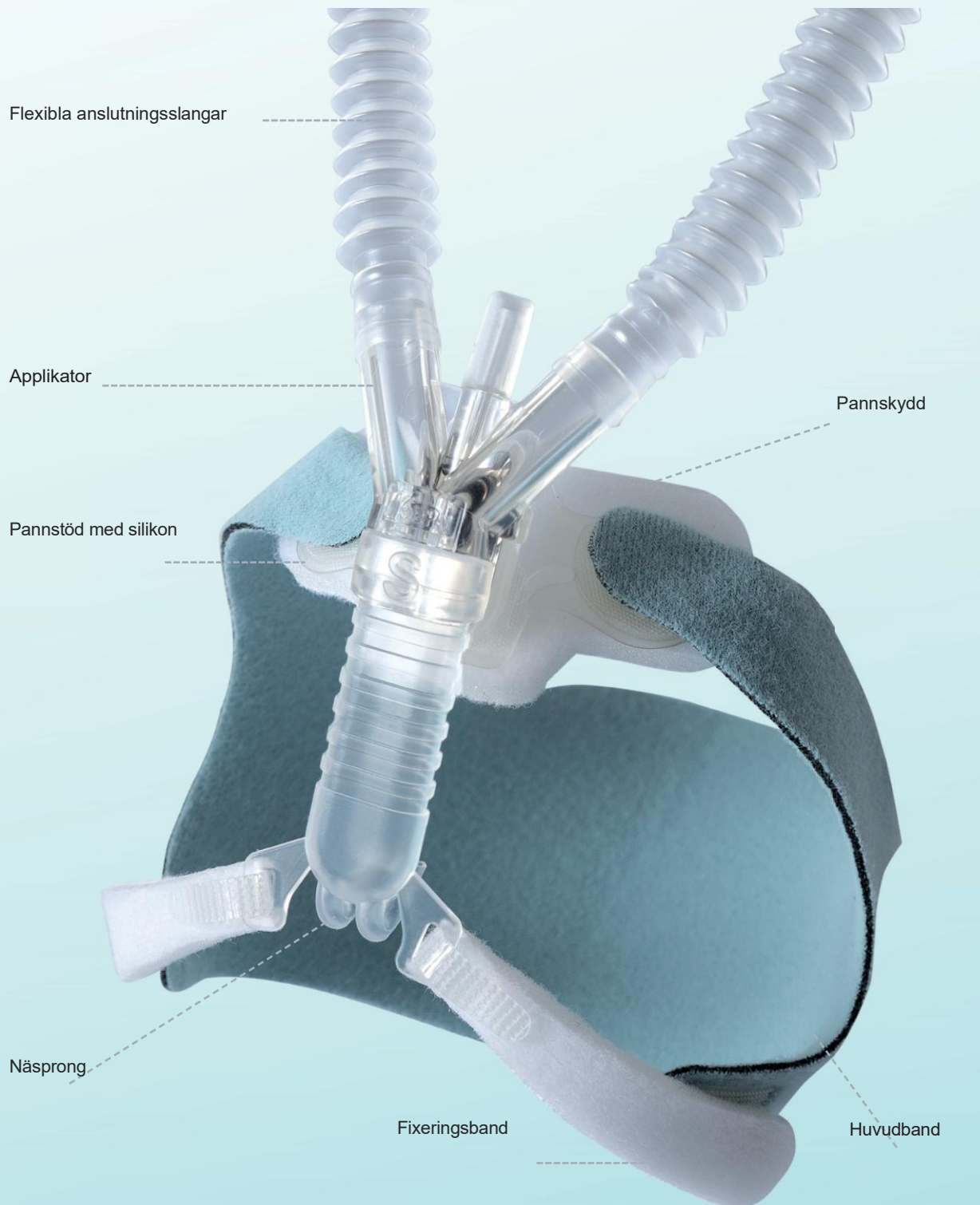

EASYFLOW

NCPAP



Det nya polstrade pannskyddet fäster på pannan tack vare gelens fästegenskaper. Den behöver inte fixeras ytterligare. Den biokompatibla silikongelen innehåller inga lösningsmedel.

Huvudbandet, som finns i tre storlekar, ger sjuksköterskan ständig kontroll över att huvudsetet är exakt anpassat till huvudets omkrets.

Huvudbandet kan endast användas för fästning av prong näsborrarna eller maskerna med mjuka fixeringsband.

Det är tillverkat av mjukt och flexibelt silikongummi med kardborreband för att fästa fixeringsbanden.

Högkvalitativt, mycket mjukt och flexibelt silikongummi används för maximal bärkomfort.

Näsprongsen undviker irritation av huden eller slemhinnan och med sin perfekt anpassade anatomiska utformning som gör att inte belastar nässkiljeväggen.

Masken har en specialanpassad bälgutformning för att ge optimal passform och den är även självtätande.

Det nya polstrade pannskyddet av silikongel håller fast applikatorn, till vilken slangarna och näsproppen eller masken är anslutna. En integrerad magnet gör det möjligt att placera applikatorn på applikatorfästet med millimeterprecision för optimalt tryck och avlastning. Flexibel anslutningsslang ökar komforten och underlättar inkopplingen. De minskar tryckbelastningen från de tunga ventilationsslangarna avsevärt och gör det enkelt att koppla bort dem från patientens näsa.

Snabba och tillförlitliga nCPAP-patientgränssnitt har avgörande för att den non-invasiva ventilationsbehandlingen ska lyckas. Det nya pannskyddet med silikongel kan fästas på patientens panna direkt efter det tagits ur förpackningen. Man kan behöva ta bort lite fosterfett. Med hjälp av prongset får patienten en fullgod nCPAP-behandling tills patienten kan behandlas mer bekvämt på neonatalintensivvårdsavdelningen. När patienten kan överföras till rutinvård kan de flexibla, justerbara huvudbanden användas. Huvudbandet möjliggör justering av de prongset eller maskerna med mjuka fixeringsremmar som fästs med kardborreband.

Våra beprövade mössor, färgkodade för de 11 olika storlekarna, finns fortfarande tillgängliga. De hudvänliga materialen är väl beprövade i klinisk miljö och erbjuder många fördelar. EasyFlow nCPAP-mössor med perfekt passform, skonsamma, bekväma och säkra.

ÖVERSIKT ÖVER SYSTEMTILLBEHÖR

Huvor (levereras inklusive pannstöd och remmar)					
Storlek	Färg	Omkrets	Vikt	Antal	Artikelnr
XS		20–22 cm	500–700 g	1	1 701 61 019
S		22–24 cm	700–900 g	1	1 701 61 020
M		24–26 cm	900–1 200 g	1	1 701 61 021
L		26–28 cm	1 200–1 600 g	1	1 701 61 022
XL		28–30 cm	1 600–2 400 g	1	1 701 61 023
XXL		30–33 cm	2 400–3 000 g	1	1 701 61 024
3XL		33–36 cm	3 000–4 200 g	1	1 701 61 025
4XL		36–39 cm	4 200–6 000 g	1	1 701 61 026
5XL		39–42 cm	6 000–7 300 g	1	1 701 61 027
6XL		42–45 cm	7 300–8 800 g	1	1 701 61 028
7XL		45–48 cm	> 8 800 g	1	1 701 61 029

Huvudband med pannstöd och 2 fästremmar, (endast i kombination med vadderad pannkudde)			
Omkrets	Vikt	Storlek	Artikelnr
20	500–1 350	mikro	1 701 61 040
28 - 36	1 350 - 3 700	mini	1 701 61 041
36	3 700–8 400	maxi	1 701 61 042

	Antal	Artikelnr
vadderad pannkudde med silikongel	5	1 701 61 018
Vadderad pannkudde	5	1 701 61 017

	Artikelnr
Mall för mask/prong storlek	1 701 60 020
Måttband för huvudomfång och kroppslängd	1 701 60 074

	Antal	Artikelnr
Applikator med magnet och tryckförseglingslock	5	1 701 61 161
Flexibel anslutningsslangset Ø 10 mm	5	1 701 63 408
Flexibel anslutningsslangset Ø 12 mm (F & P)	5	1 701 63 409
Förlängning till mask/prong	5	1 701 61 000

Prong	Antal	Artikelnr
Storlek		
XXS	5	1 701 61 007
XS	5	1 701 61 006
S	5	1 701 61 001
M	5	1 701 61 002
L	5	1 701 61 003
XL	5	1 701 61 004

Masker	Antal	Artikelnr
Storlek		
XS	5	1 701 61 005
M	5	1 701 61 013
L	5	1 701 61 014
XL	5	1 701 61 015

Svensk återförsäljare



Aspira Medical AB Duvnäs
781 90 Borlänge
Tel: 0243-23 05 00
info@aspira.se www.aspira.se



Fritz Stephan GmbH Medizintechnik Kirchstraße
19

56412 Gackebach Tyskland

Tel +49 6439 9125 0

Fax +49 6439 9125 111

E-post info@stephan-gmbh.com

Web www.stephan-gmbh.com

